

AQUASTAR

DAS THERMISCHE REIZGERÄT



- EINFACHE HANDHABUNG
- 4 VORWÄHLBARE TEMPERATUREN
- ALLE TEMPERATUREN FREI PROGRAMMIERBAR
- HOHE TEMPERATURGENAUIGKEIT

AQUASTAR

DAS THERMISCHE REIZGERÄT

Das Gerät AQUASTAR dient zur kalorischen Prüfung des Vestibularis-Organes mit Wasser. Modernste Mikroprozessortechnologie ermöglicht eine einfache Bedienung, sowie ein hohes Mass an Genauigkeit und Patientensicherheit.


Über einen Drehschalter kann die Reizdauer eingestellt werden. Die digitale Zeitsteuerung gibt beim Start und am Ende der Spülzeit ein akustisches Signal.



Mit einem zweiten Drehschalter kann die Reiztemperatur eingestellt werden. Zur Auswahl stehen 4 Vorwahlmöglichkeiten. Die gewünschte Temperatur kann vom Benutzer in 0,2°C schritten individuell programmiert werden. Zum Beispiel: 37°C für die Ohrspülung, 27°C, 30°C und 44°C für den kalorischen Reiz.



Der Wasserdruck bzw. die Durchflussmenge kann mit Hilfe des Druckminderers zwischen 1,3 bar für den kalorischen Reiz und 2 bar für die Ohrspülung eingestellt werden.

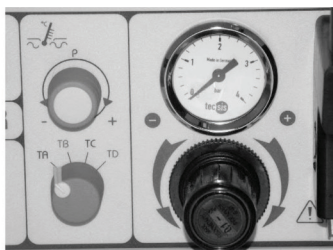

Technische Daten

Netzspannung:	220 - 240 V~ +/- 10 % 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 1500 W
Wassertemperaturen:	4 frei programmierbare Temperatureinstellungen z.B. 27 / 30 / 37 / 44 °C
Temperaturgenauigkeit:	+/- 0,3 °C
Wasserdurchfluss:	ca. 300 ml / min. (bei der Reizung 1,3 bar)
Wasseranschluss:	G 3/4" Außengewinde (Zufluss) G 1/2" Außengewinde (Abfluss)
Abmessungen:	H x B x T 120 x 310 x 350 mm
Gewicht:	ca. 4,5 Kg
Schutzklasse:	1
Schutzgrad:	Typ B
Gerätesicherheit:	IEC-601-1 IEC-601-2
MPG Klassifizierung:	Klasse IIa
CE-Kennzeichnung:	CE 0344
Hersteller:	INSTRUMENTATION S.A. DIFRA Rue de l'Eglise 84 B-4840 Welkenraedt Belgien
Zertifiziert nach:	ISO 9001-2003 ISO 13485

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Produkte können sich Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens der Hersteller bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen und Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bei uns nach.

Hörniß

MEDIZINTECHNIK GmbH
Burgstraße 28 a
51371 Leverkusen

Telefon 0214 - 23420
Fax 0214 - 22470
Internet: www.hoerniss.de
E-mail: info@hoerniss.de

überreicht durch:

Mack Medizintechnik GmbH

Schirmbeckstraße 13
85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm
fon +49 (0) 84 41 - 80 89-0
fax +49 (0) 84 41 - 80 89-18
info@mack-team.de
www.mack-team.de

