


nanoTymp®

TYMPANOMETRIE

REFLEX SCREENING

INTUITIVE BEDIENUNG

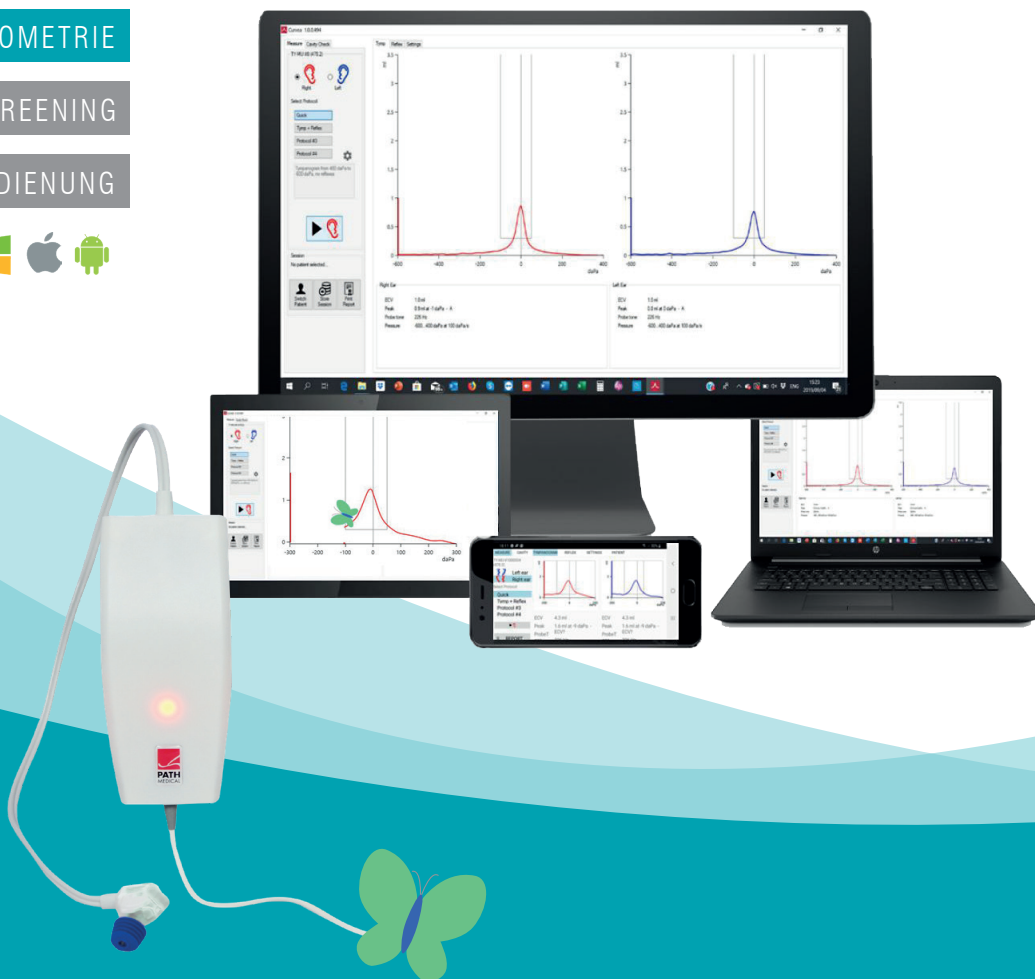

Das nanoTymp bietet Tympanometrie und Reflex-Screening in einer kompakten und damit platzsparenden Einheit. Sie können dem Probanden das System einfach umhängen und haben damit die Hände für das Sondenhandling frei.

nanoTymp®

Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB-Anschluss des Computers. Das nanoTymp ist einerseits hochflexibel, da netzunabhängig und andererseits durch einen fehlenden Akku besonders leicht. Die Standard-Tympanometrie erfolgt mit 226 Hz. Optional erhältlich gibt es ebenfalls einen 1000 Hz Sonden ton zur zuverlässigen Messung von Neugeborenen und Säuglingen. Die Standard-Reflexmessung erfolgt bei 0.5; 1.0; 2.0 & 4.0 kHz und zusätzlich mit einem Breitbandrauschen.

Das nanoTymp kann bis zu vier unterschiedliche Testeinstellungen als Benutzertests abspeichern. Damit reagiert das Gerät sofort auf Knopfdruck und die Messung wird somit delegierbar. Die nanoTymp Software ist lauffähig unter Apple Macintosh, Android Smartphones und Tablets oder einem klassischen Windows Computer. Die Untersuchungsdaten werden in der nanoTymp Software gespeichert und der Ausdruck erfolgt über Ihren Standarddrucker.

Über die Avantgarde-Software besteht die Möglichkeit zur Visualisierung, Verwaltung und Archivierung Ihrer Untersuchungs- und Messdaten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Datenanbindung an Ihre vorhandene Praxis-EDV via GDT Anbindung.

Spezifikationen:

nanoTymp Software

nanoTymp mit automatischer Tympanometrie bei 226Hz

Reflex-Screening bei 0.5; 1.0; 2.0 & 4.0 kHz und BBN

Compliance-Bereich von 0 bis 5ml

Druckbereich max. -600 bis +400 daPa; einstellbar

Pumpengeschwindigkeit 50; 100; 150; 200 daPa/s

Gewicht ca. 190g

Abmessungen 140x62x40mm

Sonden Kabellänge ca. 80cm

USB Kabellänge ca. 150cm

Spannungsversorgung via USB Port

Lieferumfang:

Tympmodul mit fester Tymp Sonde und USB-Anschluss

nanoTymp Software (Windows / Apple MAC / Android)

GDT Schnittstelle

Ohrstöpselsortiment

Bedienungsanleitung

Zubehör

MPG Buch

USB-Kabel

CE nach MPG Klasse IIa



Originalgröße >>

Mack Medizintechnik GmbH

Überreicht durch:

Schirmbeckstr. 13 | 85276 Pfaffenhofen/Ilm
Tel.: 08441-8089-0 | Fax: 08441-8089-18

info@mack-team.de

www.mack-team.de